


??????? «???????????????? ? ????»

• ?????????? ?????????????? ? ???

Для створення картки «дослідження на ВІЛ», потрібно в ЕМК пацієнта перейти на гілку «Верифікаційні дослідження» і натиснути кнопку «Створити».

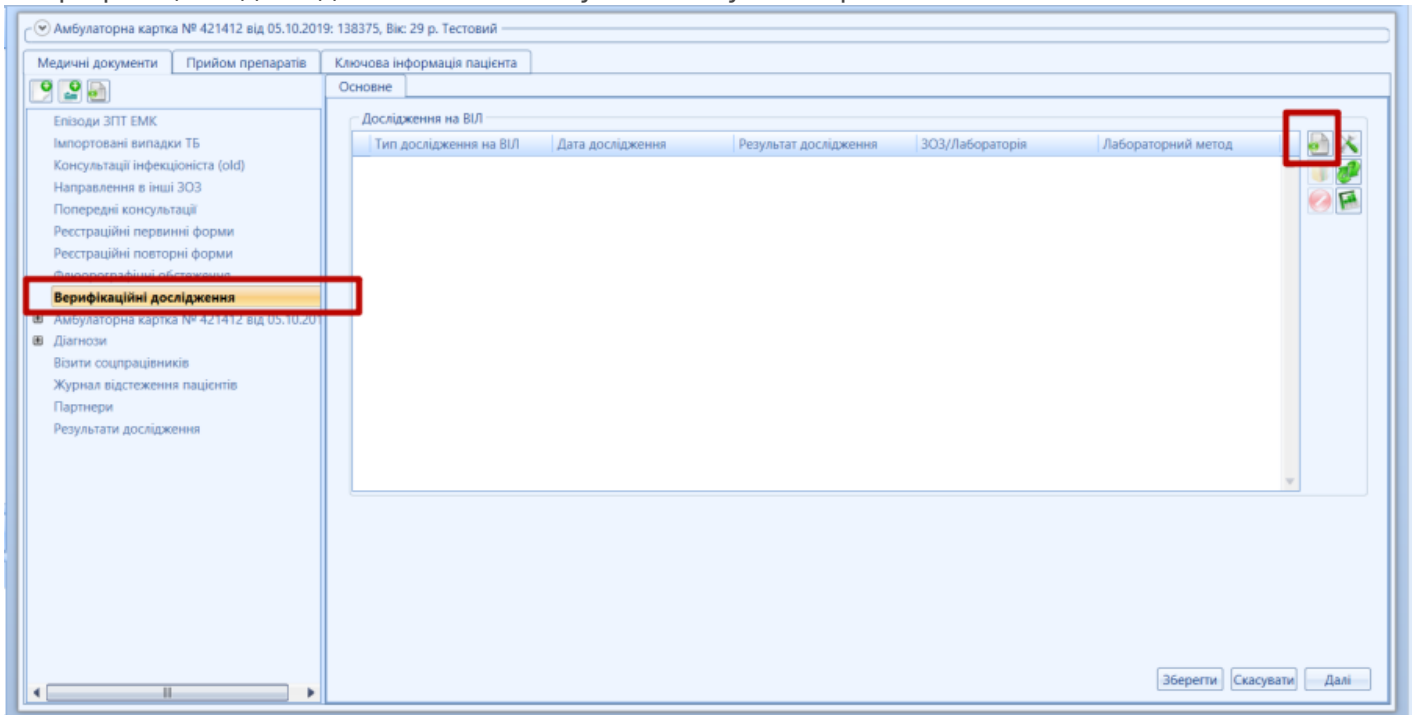

Відкриється картка створення «Дослідження на ВІЛ». Потрібно заповнити поля даними і натиснути кнопку «Зберегти».



• ?????????? «???????????????? ? ????-????????????»

Для створення «Тестування на недавність ВІЛ-інфекції» потрібно, в картці створення в полі «Тип дослідження на ВІЛ» вибрати пункт «Тестування на недавність ВІЛ-інфекції».

Вік пацієнта	
Організація створення*	Полтавський обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом
Тип дослідження на ВІЛ*	Тестування на недавність ВІЛ-інфекції
ЗОЗ/Лабораторія	
Біоматеріал	
Наявність згоди*	✘

Якщо пацієнт не надав згоду на тестування в полі «Наявність згоди» обираємо «Ні», заповнюємо «Дату відмови», «Причину відмови» і натискаєм «Зберегти».

Вік пацієнта	30
Організація створення*	Полтавський обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом
Тип дослідження на ВІЛ*	Тестування на недавність ВІЛ-інфекції
ЗОЗ/Лабораторія	
Біоматеріал	
Наявність згоди*	Ні
Дата відмови*	✘
Причина відмови*	✘

Якщо пацієнт надав згоду на тестування в полі «Наявність згоди» потрібно вибрати «Так».

Вік пацієнта	
Організація створення*	Полтавський обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом
Тип дослідження на ВІЛ*	Тестування на недавність ВІЛ-інфекції
ЗОЗ/Лабораторія	
Біоматеріал	
Наявність згоди*	<div style="border: 1px solid orange; padding: 2px;"> ✘ Ні Так </div>

Після цього в картці з'являться нові поля. Їх потрібно заповнити та натиснути «зберегти». Якщо тестування відбувалось в Лікувальному закладі в полі «Модальність послуг» обираємо «Лікувальний заклад», якщо тестування відбувалось в іншому місці обираємо «Спільнота».

Вік пацієнта	30				
Організація створення*	Полтавський обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом				
Тип дослідження на ВІЛ*	Тестування на недавність ВІЛ-інфекції				
ЗОЗ/Лабораторія					
Біоматеріал					
Наявність згоди*	Так	Дата згоди*	05.10.2020	Дата тестування*	10.10.2020
Модальність послуг*	Лікувальний заклад	Модальні групи ЛЗ*	✘		
Ключова група*	Спільнота				
Тестова система*	Asante™ HIV-1 Rapid Recency® Assay Кат.№1130-020(20 тестів набір) ТІЛЬКИ ДЛЯ ДОСЛІДНЕЦЬКИХ ЦІЛЕЙ, P-LM0303 до 19.08.2021; Sedia Biosciences				
Вік пацієнта	29				
Організація створення*	Полтавський обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом				
Тип дослідження на ВІЛ*	Тестування на недавність ВІЛ-інфекції				
ЗОЗ/Лабораторія					
Біоматеріал					
Наявність згоди*	Так	Дата згоди*	05.10.2020	Дата тестування*	05.10.2020
Модальність послуг*	Лікувальний заклад	Модальні групи ЛЗ*	Індексне тестування		
Ключова група*	Особи, що перебувають в місцях позбавлення волі, в т.ч. слідчих ізоляторах				
Тестова система*	Asante™ HIV-1 Rapid Recency® Assay Кат.№1130-020(20 тестів набір) ТІЛЬКИ ДЛЯ ДОСЛІДНЕЦЬКИХ ЦІЛЕЙ, P-LM0303 до 19.08.2021; Sedia Biosciences				
Контрольна смужка*	Присутня	Верифікаційна смужка*	Присутня	Давня інфекція (смужка)*	Присутня
Попередній результат	Протестовано помилково	Підтвердити результат		Статус результату	Не підтверджений
Дата забору ВН		Результат ВН			

• ??????????? ?????????????? ??????????????

Поле «Попередній результат» розраховується автоматично.

Вік пацієнта	29		
Організація створення*	Полтавський обласний центр профілактики ВІЛ-Інфекції та боротьби зі СНІДом		
Тип дослідження на ВІЛ*	Тестування на недавність ВІЛ-інфекції ▾		
ЗОЗ/Лабораторія			
Біоматеріал	▾		
Наявність згоди*	Так ▾	Дата згоди*	05.10.2020 ▾
Модальність послуг*	Лікувальний заклад ▾	Модальні групи ЛЗ*	Індексне тестування
Ключова група*	Особи, що перебувають в місцях позбавлення волі, в т.ч. слідчих ізоляторах		
Тестова система*	Asanté™ HIV-1 Rapid Recency® Assay Кат.№1130-020(20 тестів набір) ТІЛЬКИ ДЛЯ ДОСЛІДНЕЦЬКИХ ЦІЛЕЙ, P-L		
Контрольна смужка*	Присутня ▾	Верифікаційна смужка*	Присутня ▾
Попередній результат	Протестовано помилково ▾	Підтвердити результат	
Дата забору ВН	▾	Результат ВН	▾
Остаточний результат	▾		

Логіка розрахунку поля «Попередній результат»:

- ○ Результат тесту = «Протестована помилково»(якщо пацієнт відповідає хоча би одній з наступних умов):
 - Вік пацієнта на Дату згоди менше 15 років
 - «Дата початку АРТ» пацієнта менше або дорівнює «Дата згоди»
 - Тестування на «недавність ВІЛ» вважається дійсним, якщо пацієнт надав згоду впродовж 30 днів від дати Верифікаційного дослідження
- ○ Результат тесту= «Недавнє інфікування (та):»
 - Контрольна смужка: Присутня
 - Верифікаційна смужка: Присутня
 - Давня інфекція (смужка): Відсутня.
- ○ Результат тесту= «Давнє інфікування» (та):
 - Контрольна смужка: Присутня
 - Верифікаційна смужка: Присутня
 - Давня інфекція (смужка): Присутня.

○ Результат тесту= «Негативний» (та):

- Контрольна смужка: Присутня
- Верифікаційна смужка: Відсутня
- Давня інфекція (смужка): Відсутня.

○ Результат тесту= «Недійсний»:

Варіант 1:

- Контрольна смужка= Відсутня.

Варіант 2:

- Контрольна смужка= Присутня,
- Верифікаційна смужка = Відсутня,
- Давня інфекція (смужка)= Присутня.

Перевірити дані, якщо все вірно натиснути на кнопку «Підвередити результат».

Щоб дані по «Тестування на недавність ВІЛ» потрапили у звіт, у пацієнта має бути зроблено «Верифікаційне дослідження» не пізніше 30 днів від дати згоди на недавність.

• ?????????? ?????????????? ??????????????

Для формування остаточного результату потрібно натиснути кнопку «Підвередити результат».

Вік пацієнта	30		
Організація створення*	Полтавський обласний центр профілактики ВІЛ-Інфекції та боротьби зі СНІДом		
Тип дослідження на ВІЛ*	Тестування на недавність ВІЛ-інфекції		
ЗОЗ/Лабораторія			
Біоматеріал			
Наявність згоди*	Так	Дата згоди*	05.10.2020
Дата тестування*	10.10.2020		
Модальність послуг*	Спільнота	Модальні групи спільноти*	Індексне тестування
Ключова група*	Інші групи населення		
Тестова система*	Asanté™ HIV-1 Rapid Recency® Assay Кат.№1130-020(20 тестів набір) ТІЛЬКИ ДЛЯ ДОСЛІДНЕЦЬКИХ ЦІЛЕЙ, P-LM0303 до 19.08.2021; Sedia Biosciences		
Контрольна смужка*	Присутня	Верифікаційна смужка*	Присутня
Давня інфекція (смужка)*	Присутня		
Попередній результат	Давнє інфікування	Підвердити результат	Статус результату
Результат ВН	Підтверджений		
Дата забору ВН			
Результат ВН			
Остаточний результат	Давнє інфікування		

Логіка розрахунку поля «Остаточний результат»:

- Остаточний результат = «Недавнє інфікування» (та):
- «Попередній результат» = «Недавнє інфікування»
- Статус результату = «Підтверджений»

- **ВН більше 1000 РНК коп/мл**
 - **Остаточний результат = «Давнє інфікування»**

Варіант 1:

- **Попередній результат = «Давнє інфікування»**
- **Статус результату = «Підтверджений»**

Варіант 2:


- **Попередній результат = «Недавнє інфікування»**
- **Статус результату = «Підтверджений»**
- **Результат ВН належить діапазону від 0 до 999 коп/мл**

Поле «Дата збору ВН» і «Результат ВН» не доступне для редагування, вони заповнюються автоматично, якщо у пацієнта є підтверджений аналіз «вірусної нагрзуки» зроблений не пізніше 15 днів від дати згоди на «тестування на недавність ВІЛ».

???? «???????? ????-????????»

???????????? ?????

Для формування звіту «Недавня ВІЛ-інфекція» потрібно перейти в Звіти і обрати «Pepfar_Indicator_RecentHIVInfection», заповнити поля (параметри) даними та натискаємо кнопку «Перегляд».

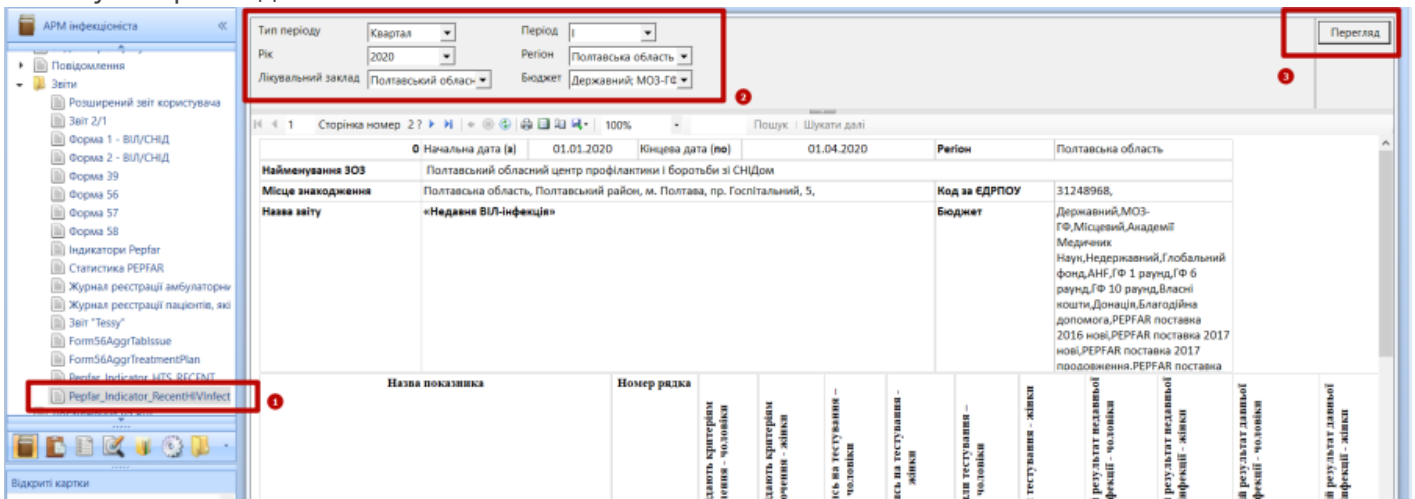

Дані, що потрапляють в звіт

Звіт формується на основі даних реєстру «Дослідження на ВІЛ» за наступними умовами:

Умова 1:

- «Дата згоди» або «Дата відмови» належить звітному періоду
- Тип дослідження = Тестування на недавність ВІЛ-інфекції
- Лікувальний заклад = організації створення запису

Умова 2:

Для тих пацієнтів, що не пройшли по Умові 1 ТА в них не існує Типу дослідження із значенням Тестування на недавність ВІЛ-інфекції

- «Дата дослідження» належить звітному періоду
- Тип дослідження = Верифікаційне дослідження
- Лікувальний заклад = організації створення запису

• «HTS_RECENT ?????????? ????? ? ?????
???????????????????? ?????????? ???-????????????»

????????????????????

Для формування звіту «HTS_RECENT Кількість осіб у яких діагностовано недавню ВІЛ-інфекцію» потрібно перейти в Звіти і обрати «Perfar_Indicator_HTS_RECENT», заповнити поля (параметри) даними та натискаємо кнопку «Перегляд».

The screenshot shows the ARМ Infectionist software interface. The top filter panel is highlighted with a red box and contains the following fields:

- Тип періоду: Квартал
- Період: I
- Рік: 2020
- Регіон: Київська область; Пк
- Лікувальний заклад: Полтавський облас...
- Бюджет: Державний; МОЗ-ГК

The main data table has the following columns:

Назва показника	Номер рядка	Повернений результат останньої ВІЛ-інфекції - чоловіки	Повернений результат останньої ВІЛ-інфекції - жінки	Останній результат давньої ВІЛ-інфекції - чоловіки	Останній результат давньої ВІЛ-інфекції - жінки	Останній результат давньої ВІЛ-інфекції - чоловіки	Останній результат давньої ВІЛ-інфекції - жінки		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Дані, що потрапляють в звіт

Звіт формується на основі даних реєстру «Дослідження на ВІЛ» за наступними умовами:

- «Дата згоди» або «Дата відмови» належить звітному періоду
- Тип дослідження = Тестування на недавність ВІЛ-інфекції
- Лікувальний заклад = організації створення запису

Версія #2

Національний адміністратор створив 28 жовтня 2022 05:02:24

Марина Овчиннікова оновив 30 січня 2025 09:49:19